

LA NOUVELLE GÉNÉRATION D'APPLICATEURS A ÉTÉ CONÇU:

- ◇ Pour répondre pleinement aux besoins de vos patients
- ◇ Pour adapter les traitements aux différentes tailles et poids des patients
- ◇ En collaboration avec les plus grands spécialistes européens

PANTALON 24

Le nouvel applicateur avec velcro s'adapte parfaitement à tous les types de corps en raison de la grande zone de couverture du velcro. Tous les applicateurs Lymphastim disposent d'un chevauchement des chambres pour un traitement plus précis et plus efficace.



PANTALON 24 TAILLE UNIQUE

Le pantalon taille unique a été conçu pour s'adapter rapidement et facilement aux patients. Particulièrement utile pour les clients avec des patients de taille différente.



APPLICATEURS JAMBES

Deux tailles sont disponibles - L et M.



APPLICATEUR MANCHON BRAS

Cet applicateur est unique dû à sa grande chambre du sein extrêmement ergonomique. Cette chambre couvre l'importante zone des ganglions lymphatiques sous le bras, zone cruciale pour un traitement efficace!



Paramètres techniques



BTL-6000
Lymphastim 12 TOPLINE



BTL-6000
Lymphastim 12 EASY



BTL-6000
Lymphastim 6 EASY

| | | | |
|-------------------------------|--|---|---|
| Numéro de commande | P6000.003 | P6000.002 | P6000.001 |
| Écran | 5.7" tactile couleur | Écran LED | Écran LED |
| BTL Encyclopédie | 26 protocoles cliniques (programmes en séquence) | | |
| Programmes pour l'utilisateur | 500 programmes définis par l'utilisateur | | |
| Programmes prédéfinis | 15 | 8 | 8 |
| Nombre de Chambres | 12 | 12 | 6 |
| Réglage de la pression | 20 - 160 mmHg | 20 - 160 mmHg | 20 - 160 mmHg |
| Gradient | 0 - 100% réglage en continu | 0, 10, 20, 30% | 0, 10, 20, 30% |
| Accessoires Standard | Tuyau de connexion 12 TOPLINE, 1x câble d'alimentation & stylo pour écran tactile | Tuyau de connexion 12 EASY & 1x câble d'alimentation | Tuyau de connexion 6 EASY & 1x câble d'alimentation |
| Accessoires en option | Pantalon 24 chambres Pantalon 24 chambres avec velcro Jambe 10 chambres - tail. L Jambe 10 chambres - tail.M Bras 8 chambres | Pantalon 24 chambres Pantalon 24 chambres avec velcro Jambe 10 chambres - tail.L Jambe 10 chambres - tail.M Bras 8 chambres | Pantalon 12 chambres Jambe 6 chambres - tail.L Jambe 6 chambres - tail.M Bras 6 chambres |

Interface pour 2 bras ou 2 jambes: Pour utiliser 2 bras ou 2 jambes simultanément

Bande d'extension (10 cm): Pour élargir la circonférence de l'applicateur


Guéridon



info@btlmed.fr
www.btlmed.fr



Tous les droits sont réservés. Toutes les précautions pour offrir des informations précises et pour suivre les mises à jour ont été prises, nous ne serons donc tenus pour responsables pour aucune erreur ou faute de frappe rencontrée dans ce catalogue. Les produits et leurs activités spécifiques, comme montrés dans ce catalogue, peuvent changer sans préavis.

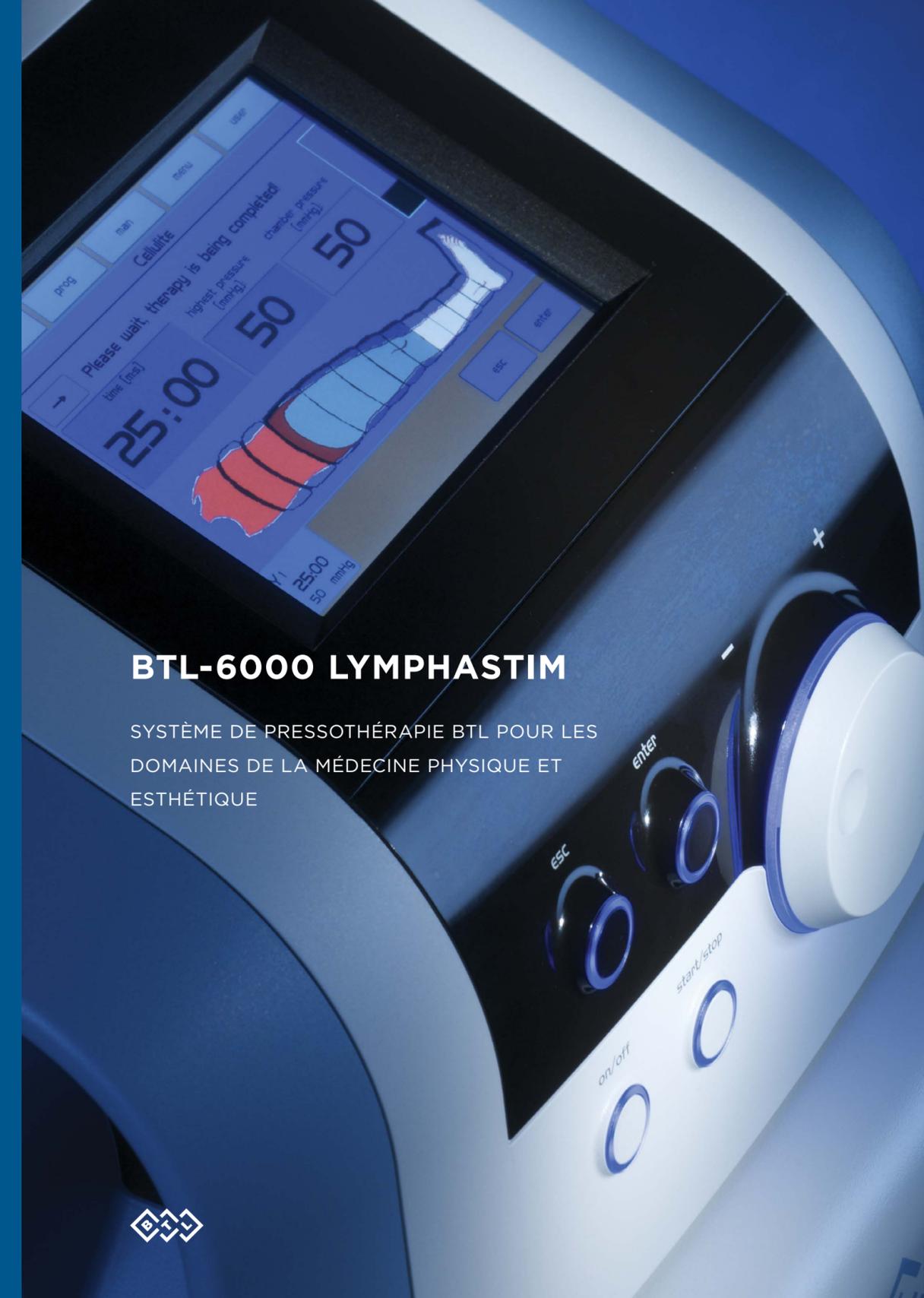

BTL-6000 LYMPHASTIM

SYSTÈME DE PRESSOTHÉRAPIE BTL POUR LES DOMAINES DE LA MÉDECINE PHYSIQUE ET ESTHÉTIQUE



TECHNOLOGY

Le système lymphatique humain est responsable de l'élimination du fluide interstitiel des tissus. Il absorbe et transporte les acides gras et les graisses à travers le système circulatoire et transporte les cellules porteuses d'antigènes dans les ganglions lymphatiques, où la réponse immunitaire est stimulée. Les maladies et les troubles du système lymphatique provoquent habituellement une enflure ainsi que d'autres symptômes.

Le Lymphastim BTL travaille sur le principe pneumatique de la pressothérapie. Les applicateurs sont spéciaux avec plusieurs chambres qui se chevauchent et offrent un massage doux qui stimule la circulation naturelle de la lymphe à travers le corps. L'effet est similaire à un drainage lymphatique manuel effectué par les mains du thérapeute.

DIFFÉRENTS DOMAINES D'APPLICATION

- ◇ Réhabilitation et médecine du sport
- ◇ Lymphologie et rhumatologie
- ◇ Spas, hôtels de bien-être et centres esthétique/beauté

LES AVANTAGES DU DRAINAGE LYMPHATIQUE

- ◇ Méthode thérapeutique bien établie & cliniquement prouvée
- ◇ Les résultats optimaux sont immédiatement visibles
- ◇ Le traitement est bien accepté par les patients
- ◇ Le corps n'est pas surchargé avec des médicaments inutiles

EFFETS MÉDICAUX

Le drainage lymphatique débloque les canaux lymphatiques et les vaisseaux. Cela provoque l'écoulement naturel de la lymphe dans les parties périphériques du corps, ce qui réduit la douleur et l'enflure causée par un excès d'action de la lymphe et de ses métabolites dans les membres.

L'application du Lymphastim aide également dans la cicatrisation et la régénération musculaire, augmentant ainsi la tonicité de la peau et la restauration de l'élasticité originale de la peau.


INDICATIONS LES PLUS FRÉQUENTES

Médical


- OEdème Chronique
- Soin après opératoire et obstruction des vaisseaux lymphatiques
- Prévention et traitement des varices
- L'insuffisance veineuse et les maladies ischémiques

Bien-être et esthétique

- Cellulite
- Soin après liposuccion
- Régénération et désintoxication
- Syndrome des jambes lourdes

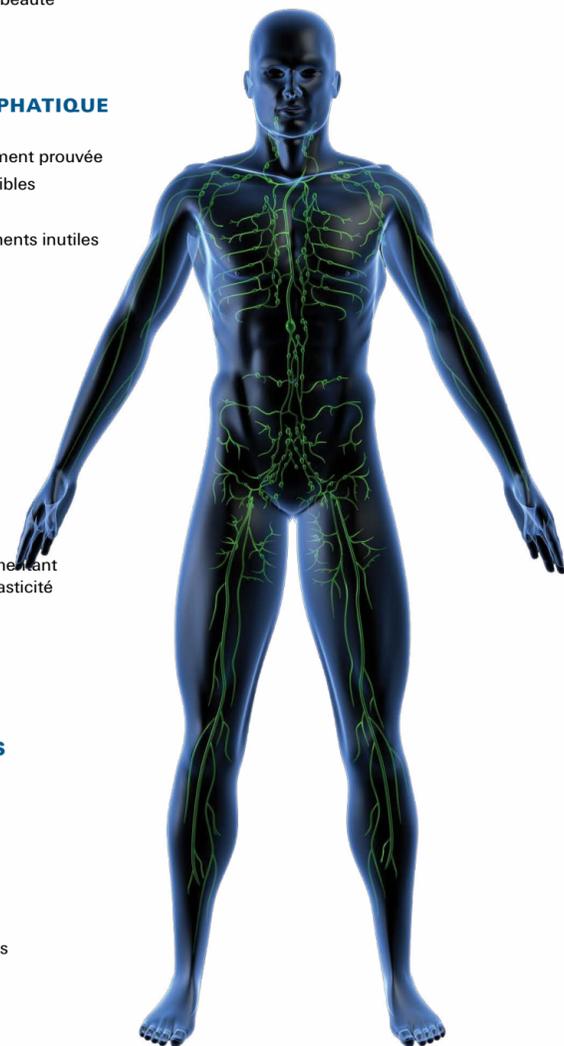

APPLICATEURS DE HAUTE QUALITÉ

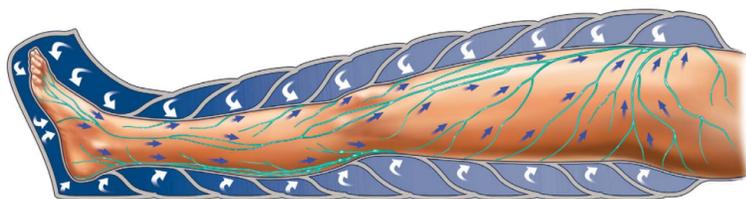

- ◇ Sections qui se chevauchent entièrement, sans lacune, pour un mouvement plus doux et plus efficace des fluides lymphatiques
- ◇ Matériel en polyamide extrêmement résistant à l'abrasion fournit une combinaison unique de légèreté et de durabilité
- ◇ Matériel antibactérien et anti-salissures spécialement conçu pour une utilisation dans un environnement médical
- ◇ Conception ergonomique pour un confort maximum



FACILE À UTILISER

- ◇ Les connecteurs permettent d'échanger les applicateurs facilement. Il suffit de brancher et de traiter.
- ◇ Système d'identification automatique des applicateurs; l'appareil reconnaît automatiquement quel applicateur est relié et choisit ensuite le bon flux de compression.



FACILE À MANIPULER


- ◇ Fermeture éclair de haute qualité sur toute la longueur pour un habillage/déshabillage rapide et facile
- ◇ L'applicateur se vide automatiquement après le traitement pour une manipulation confortable



BTL-6000 LYMPHASTIM TOPLINE

Équipement de pressothérapie professionnelle incomparable avec 12-canaux

- ◇ Facile à utiliser avec écran tactile couleur

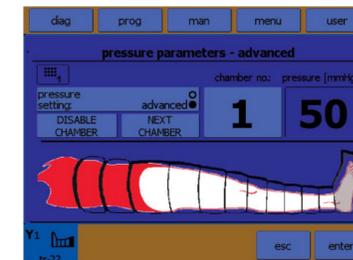

- ◇ **26 protocoles de thérapies** prédéfinis et des séquences de programmes. Les protocoles comprennent des programmes uniques pour l'ouverture des ganglions lymphatiques basés sur le principe du drainage lymphatique manuel.
- ◇ **15 programmes** pour de multiples flux de compression
- ◇ **Encyclopédie** avec les recommandations des traitements
- ◇ **Mémoire pour 100 programmes** définis par l'utilisateur

Les paramètres avancés pour un traitement personnalisé comprennent:

- Un ajustement individuel de la pression dans chaque chambre
- L'activité des chambres s'affiche sur l'écran
- Option pour désactiver une ou plusieurs chambres quand le patient ne peut tolérer la pression
- Paramètres avancés du gradient de pression

BTL-6000 LYMPHASTIM EASY

Modèles de 12-chambres / 6-chambres avec interface à LED



- ◇ Les huit (8) programmes prédéfinis peuvent être modifiés par l'utilisateur
- ◇ La pression du gradient et la vitesse du programme peuvent être réglés
- ◇ La pression peut être modifiée pendant le traitement
- ◇ L'activité des chambres est représentée sur le graphique à barres